

LASCOD

If **you like**
Kromopan
you will love
KromopanSil

Silicone par addition
de nouvelle génération



KromopanSil

silicone par addition


Silicone par addition "polyvinylsiloxane" de nouvelle génération, garantit la plus grande précision dans la prise de l'empreinte même dans un environnement humide.

Les différentes duretés (Hard/Soft) et consistances (Superlight/Light/Regular/Heavy) permettent d'obtenir d'excellents résultats, s'adaptant à chaque technique de prise d'empreinte.



Le temps de travail long augmente la maniabilité du produit, ce qui facilite la préparation de l'empreinte et, en même temps, la permanence brève dans la cavité buccale garantit un confort maximum pour le patient.



KromopanSil est thixotropique et hydrophile. Maintient sa position inaltérée après l'extrusion et positionnement dans la zone intéressée de la cavité buccale. S'adapte parfaitement à la forme anatomique des structures dentaires et des tissus mous, en permettant d'obtenir des bords parfaits et entiers, même en présence d'épaisseurs très fines.

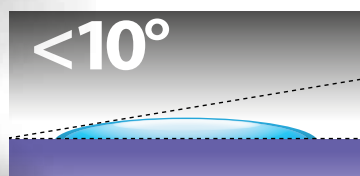

La mesure de l'angle de contact est inférieure à 10° (indice de mouillabilité).

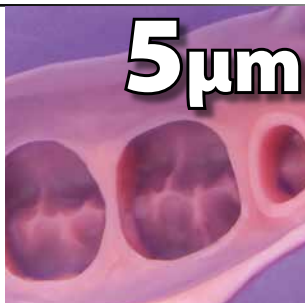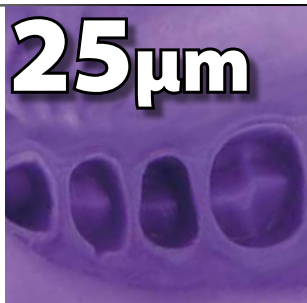

Les cartouches KromopanSil correspondent parfaitement à nos embouts mélangeurs. Les embouts mélangeurs sont disponibles en paquets de 48 pièces, facilement reconnaissables par les couleurs: jaune (GNS200), rose (GNS250) et vert (GNS270).

	EMBOUTS MÉLANGEURS		
SUPERLIGHT			
LIGHT			
REGULAR			
HEAVY			
MONO			
BITE			

KromopanSil est également disponible dans la version prise rapide , avec des temps de travail et de permanence en bouche plus courts.

	Temps de travail, incluant le temps de mélange (23°)		Temps minimum de permanence dans la bouche (37°)	
	NORMAL SET	FAST SET	NORMAL SET	FAST SET
PUTTY SOFT	2' 30"	1' 15"	2' 15"	1' 30"
PUTTY HARD	2' 30"	1' 15"	2' 15"	1' 30"
SUPERLIGHT	2'	1' 20"	1' 30"	60"
LIGHT	2'	1' 20"	1' 30"	60"
REGULAR	2'	1' 20"	1' 30"	60"
HEAVY	2'	1' 20"	1' 30"	60"
MONO	2'	-	1' 30"	-
BITE	-	45"	-	60"

KromopanSil

MONO

silicone par
addition monophase

KromopanSil Mono, est un nouveau matériau à empreinte, développé par Lascod, à viscosité moyenne, idéal pour la technique monophase. Indiqué pour relever les empreintes pour les bridges et les couronnes, les prothèses sur implants, les inlays, les onlays et les édentations partielles et totales. La viscosité particulière du produit permet aussi bien l'utilisation directe sur les parties à reproduire que l'utilisation normale dans le porte-empreinte. De plus, le matériau est injectable en seringue à l'aide des canules de mélange en dotation ou avec les seringues spécifiques pour élastomères. Grâce à son élasticité optimale, **KromopanSil Mono** se retire facilement de la cavité buccale sans subir aucune altération structurelle.

KromopanSil Mono peut être utilisé également en association avec les silicones Super Light Body / Light Body / Regular Body comme matériau de support dans le porte-empreinte individuel ou standard en acier.


- Consistance idéale pour la technique monophase
- Précision maximale dans le relevé des détails
- Hydrophilie et thixotropie maximales
- Temps de prise rapide dans la cavité buccale
- Haute résistance à la déchirure
- Retour élastique élevé
- Stabilité dimensionnelle dans le temps élevée
- Arôme léger de menthe
- Résistant à la désinfection



KromopanSil est disponible dans un mini kit composé du putty base et catalyseur (2x150ml), une cartouche body (1x50ml), 6 embouts mélangeurs et 6 embouts intra-oraux.



KromopanSil kit	NORMAL	FAST
PUTTY HARD + LIGHT BODY	KRS080	KRS580
PUTTY HARD + SUPERLIGHT BODY	KRS081	KRS581
PUTTY SOFT + LIGHT BODY	KRS082	KRS582
PUTTY SOFT + SUPERLIGHT BODY	KRS083	KRS583

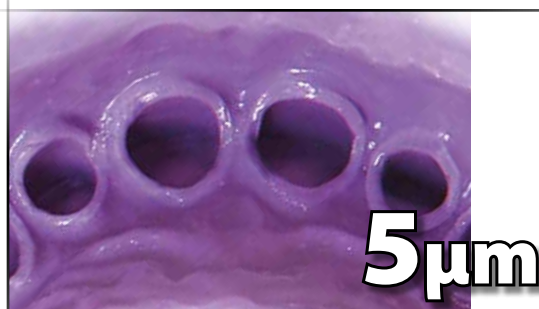

KromopanSil

silicone pour enregistrement occlusal

BITE

KromopanSil Bite est un silicone de type A (polyvinylsiloxane) spécifique pour les enregistrements occlusaux orthodontiques, les clés d'enregistrement pour les évaluations gnathologiques, les clés d'enregistrements intermaxillaires de centrisme, de protusion ou de latéralité, les enregistrements pour les évaluations diagnostiques des désordres crânio-mandibulaires, qui requièrent aussi une lecture ultérieure avec des systèmes CAD optique/laser/tactile. Caractéristiques essentielles pour garantir au technicien une base de travail absolument précise et fiable.

La stabilité dimensionnelle élevée dans le temps assure une conservation optimale même en présence de changements de température.



Le degré de dureté finale (**95 Shore A**) atteint dans des temps courts, permet de travailler sur des masses très stables en facilitant les phases de finition avec des instruments rotatifs et de coupe.



- Travail facile et sûr grâce au système de la double cartouche 1:1
- Contrôle maximum pendant le positionnement
- Thixotropique
- Viscosité imperceptible pour le patient
- Reproduction fidèle des détails occlusaux
- Temps de prise rapide
- Variation dimensionnelle minimale
- Indéformable/stable dans le temps
- Insertion et retrait faciles du modèle
- Fraisable



conditionnement

(POUR LES KITS, REGARDEZ LA PAGE PRÉCÉDENTE)

*** AUSSI DISPONIBLE EN PACK ÉCONOMIE**
4 x 50 ml cartouches
sans embouts mélangeurs

	KromopanSil	NORMAL	FAST	
	PUTTY HARD	KRS020	KRS520	2 x 300 ml base + catalyseur
	PUTTY SOFT	KRS010	KRS510	2 x 300 ml base + catalyseur
	HEAVY BODY*	KRS070	KRS570	2 x 50 ml cartouches + 12 embouts mélangeurs
	SUPERLIGHT BODY*	KRS040	KRS540	2 x 50 ml cartouches + 12 embouts mélangeurs
	LIGHT BODY*	KRS050	KRS550	2 x 50 ml cartouches + 12 embouts mélangeurs
	REGULAR BODY*	KRS060	KRS560	2 x 50 ml cartouches + 12 embouts mélangeurs
	MONO* (50 ml)	KRS400	-	2 x 50 ml cartouches + 6 embouts mélangeurs
	MONO (380 ml)	KRS480	-	2 x 380 ml cartouches + 2 embouts mélangeurs
KromopanSil BITE				
	Silicone pour enregistrement occlusal*	-	KRS095	2 x 50 ml cartouches + 12 embouts mélangeurs

Les photographies reproduites ici sont purement indicatives et ne font l'objet d'aucun engagement de production.



LASCOD S.p.A. - Via L. Longo, 18 - 50019 Sesto Fiorentino, Florence, Italy - tel.: +39 055 4215768 - lascod.italy@lascod.it
www.lascod.com

Suivez-nous!

